



天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院

檢驗科糞便潛血免疫法檢驗採檢說明

糞便潛血免疫法定量檢驗／Stool OB (EIA) 糞便潛血免疫法


1. 請先在標籤上寫上姓名、年齡及採便日期。
2. 轉開綠色蓋子，向上拔開糞便採便器的上蓋，取出採便棒，如下圖：



3. 隨機在糞便檢體以輕劃方式採集糞便，刮取量約為將挖取溝槽完全覆蓋即可。如下圖：
(※若糞便檢體刮取太多，可能影響檢驗結果)



4. 插回採便器，將蓋子用力押緊，聽到”喀”一聲即可。如下圖：

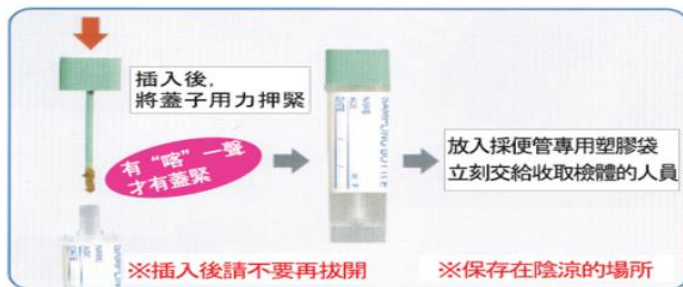

- 註 1：請勿將管瓶中的液體倒出，或任意在瓶中加水。
- 註 2：使用坐式馬桶時為避免大便掉入水中不易採取，請往前坐或反坐。並在便器內斜面先鋪上衛生紙以利採集。
- 註 3：請按照上圖所示方式採取檢體，採完後放置綠色塑膠袋中，24 小時內交付檢體到檢驗科，交付前應放在避光陰涼處。
- 註 4：遇痔瘡出血及女性月經期間，暫停採便。
- 註 5：大便過硬時可加水弄濕，待其軟化時再以採便棒刮取。若遇水便情形不易採樣時，請改日再取。
- 註 6：此內容物屬於刺激物質，請勿接觸口、眼睛及皮膚，若不慎接觸到，請立即用大量的水沖洗，必要時去看醫師。
- 註 7：檢體的保存：檢體在室溫中可保存 3 天，2°C~10°C 可保存 7 天，但最好儘快送至實驗室檢驗。

採檢說明者簽名：_____

檢驗科製 H3L0-W-R01-02